




КАТАЛОГ

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

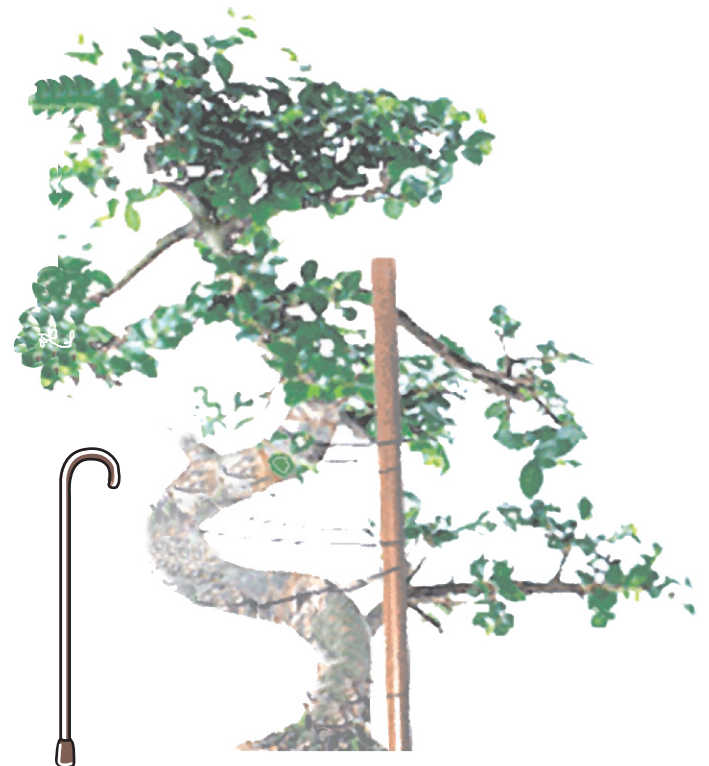

УМОВНІ ПОЗНАКИ



Максимальний зріст користувача, мм



Маса користувача, кг



Висота палиці, мм



Висота пахвової милиці, мм



Довжина нижньої секції ліктьової милиці, мм



Довжина верхньої секції ліктьової милиці, мм




Крок регулювання висоти виробу, мм



Маса виробу, кг

Розподіл виробів у підгрупі

ПАЛИЦІ ОР.1.1	ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ ОР.1.2	МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ ОР.1.3
		
с. 6-12	с. 13-14	с. 15-19

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ОР.1.4	МИЛИЦІ ПАХВОВІ ОР.1.5
	
с. 20	с. 21-25

**Захворювання за МКХ-10,
які можуть спричиняти порушення функцій опори та
ходіння, що потребують забезпечення засобами для
ходіння, керованими однією рукою**

- ◆ **G26** Екстрапиримидні і рухові порушення у разі захворювань, кваліфікованих в інших рубриках
- ◆ **G46** Судинні мозкові синдроми у разі цереброваскулярних захворювань
- ◆ **G81** Геміплегія
- ◆ **G82** Параплегія та тетраплегія
- ◆ **G83** Інші паралитичні синдроми
- ◆ **H53-H54** Зорові розлади та сліпота
- ◆ **I80** Флебіт і тромбофлебіт
- ◆ **I81** Тромбоз портальної вени
- ◆ **I82** Емболія та тромбох інших вен
- ◆ **I83** Варікозне розширення вен нижніх кінцівок
- ◆ **M05-M14** Запалювальні поліартропатії
- ◆ **M15-M17** Артрози
- ◆ **M19** Інші артрози
- ◆ **M22-M25** Ураження суглобів нижніх кінцівок (інші)
- ◆ **M80-M85** Порушення щільності та структури кістки
- ◆ **R54** Старість
- ◆ **S70-S99** Травми нижніх кінцівок
- ◆ **Q72** Дефекти, що вкорочують нижню кінцівку
- ◆ **Z60.0** Проблеми, пов'язані з адаптацією до зміни способу життя
- ◆ **Z73.8** Інші проблеми, пов'язані із труднощами підтримки життєвого укладу
- ◆ **Z89.4-Z89.9** Набута відсутність нижньої кінцівки
- ◆ **Z96.6** Наявність ортопедичних імплантатів суглобів



Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03

Умови експлуатації - для користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені:

- захворюваннями, травмами, укороченнями та деформаціями нижніх кінцівок, таза та хребта;
- неврологічними системними захворюваннями;
- загальною слабкістю тіла (похилий вік);
- помірним геміпарезом;
- помірним парезом однієї нижньої кінцівки;
- захворюванням серцево-судинної системи з недостатністю кровообігу 2 стадії або стенокардією напруги ФК III;
- наявністю ендопротеза колінного або тазостегнового суглоба;
- хворобами периферичних судин нижніх кінцівок із хронічною артеріальною недостатністю 2 ступеня, хронічною венозною недостатністю 2 ступеня;
- слоновістю нижньої кінцівки

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-зап'ясткового, ліктьового суглобу що не дають змогу користуватися палицею

ПАЛИЦІ

ОР.1.1-1 - ПАЛИЦІ, ЩО НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИ КОВЗАННЯ

ОР.1.1

Технічні характеристики



1 2, 4 3, 5 6



7, 8 9 10 11



12 13 14

ОР.1.1-1-1Д з алюмінієвого сплаву

1	1600	100	850	0,25	ПО.А (8ВР.24.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
2	1600	100	825	0,41	П1-1 (8ВР.10.01) (ПП "М. Ящук", м. Київ)
3	1600	100	780 810 840	0,380 0,388 0,396	Т1 (8ВР.13.01) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")

ОР.1.1-1-1 з алюмінієвого сплаву

4	1800 1800 1800 2000	100	865 905 945 985	0,43 0,45 0,47 0,50	П1-1 (8ВР.10.01) (ПП "М. Ящук", м. Київ)
5	1800 1800 1800 1800	100	870 900 930 960	0,404 0,412 0,420 0,428	Т1 (8ВР.13.01) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
6	1800	100	905	0,36	8ВР.39.02 (ФОП "Скочилов Д.Є.", ТОВ "СЛГтаР")
7	1800	75	895	0,40	П-А (8ВР.35.01) (ТОВ "Норма-Трейд")
8	1800	75	895	0,40	П-П (8ВР.35.02) (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.1-1-2Д зі сталі

9	1600	75	850	0,45	ПМ (8ВР.17.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")
---	------	----	-----	------	---

ОР.1.1-1-2 зі сталі

10	1800	100	895	0,38	8ВР.39.03 (ФОП "Скочилов Д.Є.", ТОВ "СЛГтаР")
----	------	-----	-----	------	---

ОР.1.1-1-3Д з деревини

11	1600	75	850	0,40	ПД (8ВР.17.03)* (ТОВ "Норма-Трейд")
----	------	----	-----	------	---

ОР.1.1-1-3 з деревини

12	2000	100	1000	0,60	8ВР.12 (СПД ФО "Костриба М.В.)
13	1800	100	910	0,35	8ВР.39.01* (ТОВ "СЛГтаР")

ОР.1.1-1-4Д з полімерних матеріалів

14	1600	75	840	0,30	ПСП-1 (8ВР.32.01) (ТОВ "Норма-Трейд")
----	------	----	-----	------	---

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПО.А, П1-1, Т1, ПМ, ПД, ПСП-1 - призначають дітям


КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника

П-А, П-П - мають анатомічне руків'я (праве або ліве)


Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ОР.1.1-2 - ПАЛИЦІ, ЩО НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

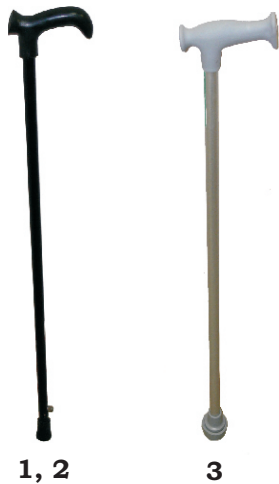

1, 2

3

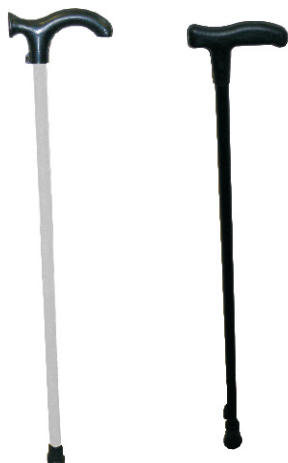

4,7

5, 6

Технічні характеристики



ОР.1.1-2-1-1Д з алюмінієвого сплаву

1	1600	100	825	0,45	П1-2 (8ВР.10.02) (ПП "М. Ящук", м. Київ)
ОР.1.1-2-1-1 з алюмінієвого сплаву					
2	1800	100	865	0,46	П1-2 (8ВР.10.02) (ПП "М. Ящук", м. Київ)
	1800		905	0,49	
	1800		945	0,51	
	2000		985	0,53	
3	1800	100	860	0,35	ПО.А.3 (8ВР.24.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
4	1600	100	930	0,50	П-1а (8ВР.33.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")
ОР.1.1-2-1-2Д з алюмінієвого сплаву					
5	1600	100	780	0,412	Т3 (8ВР.13.02) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
	1600		810	0,420	
	1600		840	0,428	
ОР.1.1-2-1-2 з алюмінієвого сплаву					
6	1800	100	870	0,42- 0,45	Т3 (8ВР.13.02) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
	1800		900		
	1800		930		
	2000		960		
7	1800	75	960	0,45	П-1н* (ТОВ "Норма-Трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.

П1-2, ПО.А.3, П-1а - мають вбудований пристрій протиковзання

Т3, П-1н - мають вбудований пристрій протиковзання напівавтомат

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **П1-2, Т3** - призначають дітям
- ◆ Для пересування взимку
- ◆ Пристрій протиковзання напівавтомат використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею зі знімним або вбудованим пристроєм протиковзання

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ПАЛИЦІ

ОР.1.1-3 - ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.1



1 2 3 4




5 6 7 8



9 10 11

Технічні характеристики

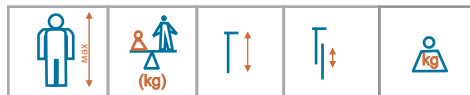

ОР.1.1-3-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	680-980	25	0,50	П-1* (ТОВ "Норма-Трейд")
---	------	-----	---------	----	------	------------------------------------

ОР.1.1-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	760-960	25	0,37	ПхД-16 (ТОВ "ВК "Діспомед")
3	1800	100	800-950	25	0,38	ПО.А-Р.Е (8ВР.25.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
4	1800	100	780-920	35	0,31	ПО.А-Р (8ВР.31.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
5	1800	100	715-940	25	0,38	8ВР.40.01 (ФОП "Скочилов Д.Є.", ТОВ "СЛІТАР")
6	1800	100	700-950	25	0,40	ОР-920 (ТОВ "Слайг Медікал")
7	1800	100	715-945	25,5	0,40	ПхД-12 (ТОВ "ВК "Діспомед")
8	1800	100	810-910	25	0,35	ПхД-17/1 (ТОВ "ВК "Діспомед")
9	1800	100	700-950	25	0,35	ОР-928 (ТОВ "Слайг Медікал")

ОР.1.1-3-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

10	2000	100	780-960	30	0,51	ТР2 (8ВР.14.01) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
11	2000	100	780-1100	20	0,32	ПО.А-БС (8ВР.26.01)* (Підприємство "Орто-Крок")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ПО.А-Р.Е - має анатомічне руків'я (праве або ліве)

ПхД-17/1 - палиця складається

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ПАЛИЦІ

ОР.1.1-3 - ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

(продовження)



Технічні характеристики



ОР.1.1-3-1-6 з алюмінієвого сплаву						
12	2000	100	825-985	40	0,48	П1-З (8ВР.11.01) (ПП "М. Ящук")
13	2000	100	880-1020	20	0,40	ПО.А-Р.ЗР (8ВР.28.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
14	2000	100	800-1010	25	0,35	ОР-938 (ТОВ "Слайг Медікал")
15	2000	100	775-1000	25	0,50	ПА-Л (8ВР.36.01) (ТОВ "Норма-Трейд")
16	2000	100	775-1000	25	0,50	ПА-П (8ВР.36.03) (ТОВ "Норма-Трейд")
17	1800	100	840-960	20	0,32	ПО.А-Р.СК (8ВР.27.01)* (Підприємство "Орто-Крок")



ПО.А-Р.ЗР, ПА-Л, ПА-П - мають анатомічне руків'я (праве або ліве)

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ПАЛИЦІ

ОР.1.1-4 - ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.1



1

2

3

Технічні характеристики



ОР.1.1-4-1-2-5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	800-950	25	0,50	П-2н* (ТОВ "Норма-Трейд")
---	------	-----	---------	----	------	-------------------------------------

ОР.1.1-4-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	750-975	25	0,50	ПА-1л (8ВР.36.02) (ТОВ "Норма-Трейд")
3	1800	100	750-975	25	0,50	ПА-1п (8ВР.36.04) (ТОВ "Норма-Трейд")
4	2000	100	780-1005	25	0,40	П-2а (8ВР.34.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.1-4-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

5	2000	100	835-995	40	0,58	П1-4 (8ВР.11.02) (ПП "М. Яшук", м. Київ)
---	------	-----	---------	----	------	--

ОР.1.1-4-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву

6	2000	100	780-960	30	0,54	ТР5 (8ВР.14.02) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
---	------	-----	---------	----	------	--



4

5

6

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ПА-1п, ПА-1л - мають анатомічне руків'я (праве або ліве)

ПА-1п, ПА-1л, П-2а, П1-4 - мають вбудований пристрій протиковзання

П-2н, ТР5 - мають вбудований пристрій протиковзання напівавтомат

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука
- ◆ Для пересування взимку
- ◆ Пристрій протиковзання напівавтомат використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею зі знімним або вбудованим пристроєм протиковзання

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ПАЛИЦІ

ОР.1.1-4 - ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.1



Знімний пристрій проти ковзання

Технічні характеристики



ОР.1.1-4-1-3-5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	760-960	25,5	0,45	ПхД-16 (ТОВ "ВК "Діспомед")
2	1800	100	810-950	20	0,40	ПО.А-Р.Е.3 (8ВР.25.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
3	1800	100	800-940	20	0,41	ПО.А-Р.3 (8ВР.31.02*) (Підприємство "Орто-Крок")
4	1800	100	715-945	25,5	0,48	ПхД-12 (ТОВ "ВК "Діспомед")
5	1800	100	810-910	25	0,43	ПхД-17/1 (ТОВ "ВК "Діспомед")

ОР.1.1-4-1-3-6 з алюмінієвого сплаву

6	2000	100	800-1120	20	0,40	ПО.А-БС.3 (8ВР.26.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
7	1800	100	860-980	20	0,40	ПО.А-Р.СК.3 (8ВР.27.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
8	2000	100	900-1040	20	0,46	ПО.А-Р.ЗР.3 (8ВР.28.02)* (Підприємство "Орто-Крок")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з опори, руків'я, наконечника, знімного пристрою проти ковзання

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ПО.А-Р.Е.3 - має анатомічне руків'я (праве або ліве)

ПО.А-Р.ЗР.3 - має закрите руків'я

ПхД-17/1 - палиця складається

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука
- ◆ Для пересування взимку
- ◆ Знімний пристрій проти ковзання використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм проти ковзання

ПАЛИЦІ ТАКТИЛЬНІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМ ЗОРУ

ОР.1.1

ОР.1.1-5 - ПАЛИЦЯ-ОРІЄНТІР БАГАТОСЕКЦІЙНА, ЩО НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ



ОР.1.1-5-1 з алюмінієвого сплаву

1	1200	0,17	ПхД-18 (ТОВ "ВК "Діспомед")
2	1190	0,30	ОР-936 (ТОВ "Слайг Медікал")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Палиця складається з 4-х секцій, послідовно з'єднаних одна з одною пружним елементом.

Руків'я виготовляють з полімерного матеріалу; до руків'я кріпиться ременець регульованої довжини.

Наконечник - у вигляді суцільнолитої кулі з високоміцної та зносостійкої пластмаси

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Стійки помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 10 градусів)

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 16

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями під час ходіння по піску, пухкій землі та взимку

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені:

- помірним парезом обох нижніх кінцівок;
- помірним трипарезом (парезом обох нижніх і однієї верхньої кінцівок);
- помірним тетрапарезом;
- хворобами периферичних судин нижніх кінцівок із хронічною артеріальною/венозною недостатністю 3-го ступеня;
- травмами та порушеннями функцій опорно-рухового апарата;
- ампутацією нижньої кінцівки з наступним протезуванням

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-зап'ясткового, ліктьового суглобу що не дають змогу користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

ОР.1.2

ОР.1.2-2 - ПАЛИЦІ З ТРЬОМА НІЖКАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ



Технічні характеристики



ОР.1.2-2-1-5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	760-880	20	0,80	ПО.А-Р.ЗР.30 (8ВР.29.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
2	1800	100	750-940	25	1,00	П-3 (ТОВ "Норма-трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), трьох ніжок з наконечниками. Має пристрій для регулювання висоти та фіксації **ПО.А-Р.ЗР.30** - має закрите руків'я

ОР.1.2-4 - ПАЛИЦІ З ЧОТИРМА НІЖКАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ



Технічні характеристики



ОР.1.2-4-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	645-870	25	0,78	8ВР.41.01 (ФОП "Скочиллов Д.Є.", ТОВ "СЛгаР")
2	1800	100	640-940	25	1,00	П-4 (ТОВ "Норма-трейд")

ОР.1.2-4-1-5 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	760-880	20	0,90	ПО.А-Р.ЗР.40 (8ВР.30.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	---------	----	------	--



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), чотирьох ніжок з наконечниками. Має пристрій для регулювання висоти та фіксації **ПО.А-Р.ЗР.40** має закрите руків'я

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06

Умови експлуатації - користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені:

- стійкими деформаціями/захворюваннями кісток та суглобів нижніх кінцівок з анкілозом, вираженою контрактурою, дефектами кісток, хибним суглобом;
- стійким больовим синдром в нижніх кінцівках;
- наявністю ампутаційних кукс однієї нижньої кінцівки або використанням протезів на обидві нижні кінцівки;
- порочними положеннями стоп із трофічними розладами та з неможливістю користуватися ортопедичним взуттям;
- свищевими формами остеомієліта однієї нижньої кінцівки з порушенням її опороздатності;
- наявністю ендопротезів колінного(-их) або тазостегнового(-их) суглобів;
- хворобами периферичних судин обох нижніх кінцівок із хронічною артеріальною недостатністю 2 - 3 ступеню;
- хронічною венозною недостатністю 2 - 3 ступеню;
- слоновістю обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемії;
- помірним або вираженим геміпарезом;
- помірним або вираженим парезом обох нижніх кінцівок;
- вираженим парезом однієї нижньої кінцівки, поєднаним з парезом однієї верхньої кінцівки (перехресно)

ПРОТИПОКАЗАННЯ


- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті або промене-зап'ясткового, ліктьового суглобу, що не дають змогу користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

ОР.1.3-1 МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.3

Технічні характеристики

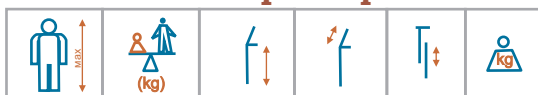

1 2 3 4 5



6 7 8 9



10 11 12 13



14 15 16 17

ОР.1.3-1-1-2.3Д з алюмінієвого сплаву

1	1300	75	500-700	180	25	0,34	МЛ7-Д2 (7ВР.14.07)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	----	---------	-----	----	------	--

ОР.1.3-1-1-3.4Д з алюмінієвого

2	1600	130	610-800	215-255	20	0,50	МЛ4-СТ2 (7ВР.14.04)* (Підприємство "Орто-Крок")
3	1600	130	580-805	175-225	25	0,50	МЛД-2 (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.3-1-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

4	1600	130	620-920	220	25	0,56	МЛ5-М3 (7ВР.14.05)* (Підприємство "Орто-Крок")
5	1800	130	625-930	225	25	0,45	МЛ2-СТ (7ВР.14.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
6	1800	100	685-985	210	25	0,70	МЛ-1* (ТОВ "Норма-трейд")

ОР.1.3-1-1-5 з алюмінієвого сплаву

7	1800	100	730-960	230	25,5	0,55	МЛД-02 (ТОВ "ВК "Діспомед")
8	1800	100	715-945	245-320	25	0,60	МЛД-03 (ТОВ "ВК "Діспомед")
9	1800	100	700-950	225-300	25	0,55	МК-923 (ТОВ "Слайг Медікал")
10	1800	100	700-950	230-305	25	0,65	МК-933 (ТОВ "Слайг Медікал")

ОР.1.3-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

11	2000	100	765-1005	235	30	0,60	КО-А4 (7ВР.09.03) (ТОВ "НПП "Спецмедтехніка")
12	1800	100	720-970	120	25	0,45	МЛ1-ПР (7ВР.14.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
13	1800	130	760-1010	225-295	25	0,52	МЛ6-Р2 (7ВР.14.06)* (Підприємство "Орто-Крок")
14	1800	130	750-1000	225-295	25	0,45	МЛ3-ПК3 (7ВР.14.03)* (Підприємство "Орто-Крок")
15	1800	130	790-1015	225-300	25	0,70	МЛ-2 (7ВР.22.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.3-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

16	2000	100	860-1020	212	40	0,90	7ВР.07.01 (ПП "М. Ящук")
17	2000	100	855-1150	235-310	25	0,55	7ВР.25.01 (ФОП "Скочиллов Д.Є.", ТОВ "СЛЛтаР")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, манжети, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), наконечника

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

МЛ5-М3 - має м'яку вставку в манжету

МЛ7-Д2, МЛ5-М3, МЛ2-СТ, МЛ-1, МЛД-02, КО-А4, МЛ1-ПР, 7ВР.07.01 - мають суцільну з руків'ям манжету

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛ7-Д2, МЛ4-СТ2, МЛД-2 - призначають дітям

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

ОР.1.3-2 - МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.3



1

2



3

4



5

6

Технічні характеристики



ОР.1.3-2-1.1-3.4Д з алюмінієвого сплаву

1	1600	100	580-805	175-225	25	0,60	МЛД-2а (ТОВ "Норма-трейд")
---	------	-----	---------	---------	----	------	--------------------------------------

ОР.1.3-2-1.1-4.5 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	685-985	210	25	0,70	МЛ-1а* (ТОВ "Норма-трейд")
---	------	-----	---------	-----	----	------	--------------------------------------

ОР.1.3-2-1.1-5.6 з алюмінієвого сплаву

3	2000	100	790-1015	330-405	25	0,70	МЛ-2а (7ВР.22.02)* (ТОВ "Норма-трейд")
---	------	-----	----------	---------	----	------	--

ОР.1.3-2-1.1-6 з алюмінієвого сплаву

4	2000	100	860-1020	212	40	0,90	7ВР.07.02 (ПП "М. Ящук", м. Київ)
---	------	-----	----------	-----	----	------	---

ОР.1.3-2-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву

5	2000	100	765-1005	235	30	0,65	КО-А5 (7ВР.09.04) (ТОВ НПП "Спецмедтехніка")
6	2000	100	760-1010	210	25	0,70	МЛ-1н* (ТОВ "Норма-трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з верхньої та нижньої секцій, руків'я, манжети, наконечника, пристрою проти ковзання

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

МЛД-2а, МЛ-1а, МЛ-2а, 7ВР.07.02 - мають вбудований пристрій проти ковзання

КО-А5, МЛ-1н - мають вбудований пристрій проти ковзання напівавтомат

МЛ-1а, 7ВР.07.02, КО-А5 - мають суцільну з руків'ям манжету

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛД-2а - призначають дітям

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

ОР.1.3-2 - МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.3

Технічні характеристики



1

2

3



4

5

6



7

8

9



ОР.1.3-2-1-3-3.4Д з алюмінієвого сплаву

1	1600	75	580-780	175-225	25	0,40	МЛ7-Д2 (7ВР.14.07.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	----	---------	---------	----	------	---

ОР.1.3-2-1-3-4.5 з алюмінієвого сплаву

2	1800	75	680-960	215-255	20	0,40	МЛ4-СТ2 (7ВР.14.04.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	----	---------	---------	----	------	--

ОР.1.3-2-1-3-5 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	730-960	230	25,5	0,55	МЛД-02 (ТОВ "ВК "Діспомед")
---	------	-----	---------	-----	------	------	---------------------------------------

4	1800	100	730-960	245-320	25	0,60	МЛД-03 (ТОВ "ВК "Діспомед")
---	------	-----	---------	---------	----	------	---------------------------------------

ОР.1.3-2-1-3-5.6 з алюмінієвого сплаву

5	2000	130	760-1010	220	25	0,60	МЛ5-М3 (7ВР.14.05.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	----------	-----	----	------	---

6	2000	130	760-1010	225-295	25	0,55	МЛ6-Р2 (7ВР.14.06.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	----------	---------	----	------	---

7	1800	130	770-970	225	25	0,45	МЛ2-СТ (7ВР.14.02.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	---------	-----	----	------	---

8	1800	130	750-1000	230	25	0,50	МЛ3-ПКЗ (7ВР.14.03.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	----------	-----	----	------	--

9	1800	100	720-970	120	25	0,46	МЛ1-ПР (7ВР.14.01.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
---	------	-----	---------	-----	----	------	---

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети, наконечника, знімного пристрою проти ковзання.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

МЛ5-М3 - має м'яку вставку в манжету
МЛД-02, МЛ5-М3, МЛ2-СТ, МЛ3-ПКЗ, МЛ1-ПР - мають суцільну з руків'ям манжету

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛ7-Д2 - призначають дітям

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

ОР.1.3

ОР.1.3-3 МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ТРЬОМА НІЖКАМИ



Технічні характеристики



ОР.1.3-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	720-920	220	20	0,90	МЛ8-30 (7ВР.18.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
2	1800	100	720-920	240	20	0,90	МЛ10-30 (7ВР.18.02)* (Підприємство "Орто-Крок")
3	1800	100	710-935	210	25	0,90	МЛ-3 (ТОВ "Норма-трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети. Має пристрій регулювання висоти та фіксації. Нижня секція має три ніжки з наконечниками

Має праве та ліве виконання

МЛ8-30, МЛ10-30 - мають суцільну з руків'ям манжету


ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно збільшити опорну площу милиці

ОР.1.3-4 МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ЧОТИРМА НІЖКАМИ



Технічні характеристики

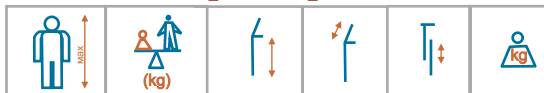

ОР.1.3-4-1-5 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	730-910	220	20	1,20	МЛ9-40 (7ВР.17.01)* (Підприємство "Орто-Крок")
2	1800	100	720-920	240	20	1,00	МЛ11-40 (7ВР.17.02)* (Підприємство "Орто-Крок")

ОР.1.3-4-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	780-1005	210	25	1,20	МЛ-4 (7ВР.23.01) (ТОВ "Норма-трейд")
---	------	-----	----------	-----	----	------	--

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети. Має пристрій регулювання висоти та фіксації. Нижня секція має чотири ніжки з наконечниками

Має праве та ліве виконання

МЛ9-40, МЛ11-40 - мають суцільну з руків'ям манжету

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно збільшити опорну площу милиці

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

ОР.1.4

ОР.1.4-1 - МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ



Технічні характеристики

--	--	--	--	--

ОР.1.4-1-1 з алюмінієвого сплаву

1500-1800	100	800-1100	25	1,20	МЛ-1С (ТОВ "Норма-трейд")
-----------	-----	----------	----	------	-------------------------------------

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, опори для передпліччя, манжети, нижньої опори, наконечника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

У разі захворювань, що супроводжуються нездатністю опори на кисть.

ОР.1.4-3 - МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ЧОТИРМА НІЖКАМИ



Технічні характеристики

--	--	--	--	--

ОР.1.4-3-1 з алюмінієвого сплаву

1800-2050	100	1000-1225	25	1,70	МЛ-4С (7ВР.24.01) (ТОВ "Норма-трейд")
-----------	-----	-----------	----	------	---

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, опори для передпліччя, манжети, нижньої опори, наконечників.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

У разі захворювань, що супроводжуються нездатністю опори на кисть

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені:

- стійкими деформаціями/захворюваннями кісток та суглобів нижніх кінцівок з анкілозом, вираженою контрактурою, з дефектами кісток, з хибним суглобом;
- стійким больовим синдромом в нижніх кінцівках;
- наявністю ампутаційних кукус однієї нижньої кінцівки або використанням протезів на обидві нижні кінцівки;
- порочними положеннями стоп із трофічними розладами та з неможливістю користуватися ортопедичним взуттям;
- свищевими формами остеомієліта однієї нижньої кінцівки з порушенням її опороздатності;
- наявністю ендпротезів колінного(-их) або тазостегнового(-их) суглобів;
- хворобами периферичних судин обох нижніх кінцівок із хронічною артеріальною недостатністю 2 - 3 ступеню;
- хронічною венозною недостатністю 2 - 3 ступеню;
- слоновістю обох нижніх кінцівок у стадії лімфодемії;
- помірним або вираженим геміпарезом;
- помірним або вираженим парезом обох нижніх кінцівок;
- вираженим парезом однієї нижньої кінцівки, поєднаним з парезом однієї верхньої кінцівки (перехресно)

ПРОТИПОКАЗАННЯ


- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-зап'ясткового, ліктьового суглобу що не дають змогу користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

ОР.1.5

ОР.1.5-1 МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

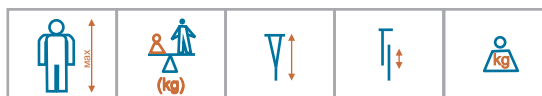

1, 2 5, 6, 9, 10 7, 8



3, 4 11 12



13 14 15

ОР.1.5-1-1Д з алюмінієвого сплаву

1	1550	100	955-1155	25,5	0,90	МпД-06(S) (ТОВ ВК "Діспомед")
2	1550	100	955-1156	25	0,80	МС-925S (ТОВ "Слайг Медікал")
3	1550	100	760-970	35	0,90	МпД-1 (7ВР.20.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")
4	1550	100	960-1135	35	0,90	МПП-1 (7ВР.19.01)* (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.5-1-1 з алюмінієвого сплаву

5	1800	100	1150-1355	25,5	0,90	МпД-06(M) (ТОВ ВК "Діспомед")
6	1800	100	1160-1360	25	0,85	МС-925M (ТОВ "Слайг Медікал")
7	1800	100	1350-1555	25,5	0,90	МпД-06(L) (ТОВ ВК "Діспомед")
8	1800	100	1350-1555	25	0,95	МС-925L (ТОВ "Слайг-Медікал")
9	1800	100	1150-1355	25	0,90	7ВР.26.01 (ФОП "Скочиллов Д.Є.", ТОВ "СЛгаР")
10	1800	100	1140-1345	25,5	0,80	МпД-05 (ТОВ ВК "Діспомед")
11	1800	100	1180-1390	40	1,30	7ВР.08.01 (ПП "М. Ящук", м. Київ)
12	1800	100	1162-1342	25	1,15	МП (7ВР.12)* (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.5-1-3Д з деревини

13	1400	60	1030-1180	30	0,90	7ВР.06.02Д (СПД ФО "Костриба")
----	------	----	-----------	----	------	--

ОР.1.5-1-3 з деревини

14	1800	100	1250-1460	30	1,50	7ВР.06.01 (СПД ФО "Костриба")
15	1800	100	1230-1440	25	1,00	7ВР.26.02* ТОВ "СЛгаР"

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бокових опор, нижньої опори з наконечником, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МпД-06(S), МС-925S, МпД-1, МПП-1, 7ВР.06.02Д - призначають дітям

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році


МИЛИЦІ ПАХВОВІ

ОР.1.5-2 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ОР.1.5



Технічні характеристики

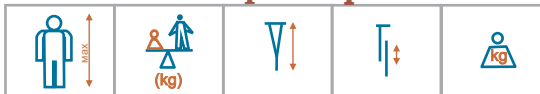

ОР.1.5-2-1-1Д з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	960-1135	35	0,90	МПП-1а (7ВР.19.02)* (ТОВ "Норма-Трейд")
2	1800	100	760-970	35	0,90	МПД-1а (7ВР.20.02)* (ТОВ "Норма-Трейд")

ОР.1.5-2-1-1 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	1180-1390	40	1,30	7ВР.08.02 (ПП "М. Ящук")
4	1800	100	1185-1355	35	1,30	МП-1* (ТОВ "Норма-Трейд")


КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бокових опор, нижньої опори з наконечником, вбудованого пристрою проти ковзання, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється. Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ МПП-1а, МПД-1а - призначають дітям
- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука

ОР.1.5-2 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ,

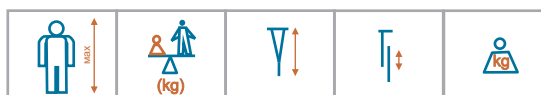

ОР.1.5-2-1-3Д з алюмінієвого сплаву

1	1550	75	955-1156	25,5	0,80	МпД-06(S) (ТОВ ВК "Діспомед")
---	------	----	----------	------	------	---

ОР.1.5-2-1-3 з алюмінієвого сплаву

2	1800	100	1150-1355	25,5	0,85	МпД-06(M) (ТОВ ВК "Діспомед")
3	2000	100	1350-1555	25,5	0,90	МпД-06(L) (ТОВ ВК "Діспомед")
4	1800	100	1140-1345	25,5	0,80	МпД-05 (ТОВ ВК "Діспомед")



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бокових опор, нижньої опори з наконечником, знімного пристрою проти ковзання, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ МпД-06(S) - призначають дітям
- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

ОР.1.5

ОР.1.5-4 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики



ОР.1.5-4-1 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	1170-1470	30	0,90	КО-А2 (7ВР.09.01) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
2	1800	100	1200-1430	25,5	0,75	МпД-07* (ТОВ ВК "Діспомед")
3	1800	100	1100-1335	25,5	0,75	МпД-08* (ТОВ ВК "Діспомед")
3	1800	100	1115-1460	25	0,90	МОП* (ТОВ "Норма-Трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секції), руків'я, пахівника.


Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука

ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ НАПІВАВТОМАТ

Технічні характеристики

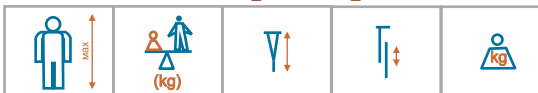

ОР.1.5-5-1-2 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	1170-1470	30	0,95	КО-А3 (7ВР.09.02) (ТОВ НТП "Спецмедтехніка")
2	1800	100	1115-1460	25	0,95	МОП-1* (ТОВ "Норма-Трейд")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секції), руків'я, пахівника

Має вбудований пристрій протиковзання

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука
- ◆ Для пересування взимку
- ◆ Знімний пристрій протиковзання використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим або знімними пристроєм протиковзання

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ



1

2



знімний пристрій протиковзання

Технічні характеристики



ОР.1.5-5-1-3 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	1200-1430	25,5	0,95	МпД-07* (ТОВ ВК "Діспомед")
2	1800	100	1100-1335	25,5	0,95	МпД-08* (ТОВ ВК "Діспомед")

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, пахівника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації

Має знімний пристрій протиковзання

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука
- ◆ Для пересування взимку
- ◆ Знімний пристрій протиковзання використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм протиковзання

Примітка. Позначка * означає, що виріб не постачається в 2013 році

СИСТЕМА ШИФРУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ХОДІННЯ, КЕРОВАНИХ ОДНІЄЮ РУКОЮ ОР.1

Умовне позначення виробів

Палиці: ОР.1.1-Х-У-Z-L

Палиці з трьома або більше ніжками: ОР.1.2-Х-У-L

Милиці ліктвові: ОР.1.3-Х-У-Z-L

Милиці з опорою на передпліччя:ОР.1.4-Х-У

Милиці пахвові ОР.1.5-Х-У-Z

Х конструктивно-технологічні ознаки	У матеріал виробу	Z конструктивні ознаки пристрою протиковзання	L висота виробу, мм
1 ОР.1.1.1 - палиці, що не регулюються за висотою без пристрою протиковзання; ОР.1.2.1- палиці, що не регулюються за висотою, з трьома ніжками; ОР.1.3.1 милиці ліктвові, що регулюються за висотою, без пристрою протиковзання; ОР.1.4.1- милиці з опорою на передпліччя, що регулюються за висотою, без пристрою протиковзання; ОР.1.5.1- милиці двостійкові пахвові, що регулюються за висотою, без пристрою протиковзання	1 -алюмінієвий сплав	1 -вбудований	1 -від 350 до 550
2 ОР.1.1.2 - палиці, що не регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання; ОР.1.2.2 -палиці, що регулюються за висотою, з трьома ніжками; ОР.1.3.2 -милиці ліктвові, що регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання; ОР.1.4.2 - милиці з опорою на передпліччя, що регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання; ОР.1.5.2 - милиці двостійкові пахвові, що регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання	2 -сталь	2 -вбудований напівавтомат	2 -від 450 до 650
	3 -деревина	3 -знімний	3 -від 550 до 750
3 ОР.1.1.3 - палиці, що регулюються за висотою, без пристрою протиковзання; ОР.1.2.3 - палиці, що не регулюються за висотою, з чотирма ніжками; ОР.1.3.3 -милиці ліктвові, що регулюються за висотою, з трьома ніжками; ОР.1.4.3 - милиці з опорою на передпліччя, що регулюються за висотою, з чотирма ніжками; ОР.1.5.3 - милиці, що регулюються за висотою та складаються	4 -полімерні матеріали		4 -від 650 до 850
	5 -комбіновані матеріали		5 -від 700 до 950
4 ОР.1.1.4 - палиці, що регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання; ОР.1.2.4 - палиці, що регулюються за висотою, з чотирма ніжками; ОР.1.3.4 - милиці ліктвові, що регулюються за висотою, з чотирма ніжками; ОР.1.5.4 - милиці одностійкові пахвові, що регулюються за висотою, без пристрою протиковзання			6 -від 800 до 1050 і більше
5 ОР.1.1.5 - палиці-орієнтири, що не регулюються за висотою; ОР.1.2.5 - палиці, що не регулюються за висотою, з п'ятьма ніжками; ОР.1.5.5 - милиці одностійкові пахвові, що регулюються за висотою, з пристроєм протиковзання			
6 ОР.1.1.6 - палиці-орієнтири, що регулюються за висотою; ОР.1.2.6 - палиці, що регулюються за висотою, з п'ятьма ніжками			